

LightBAR: Håndtering af Biologisk Materiale

Besøg	CID1,2,3,4	CID1,2,3,4	CID1,2,3,4	CID1,2,3,4
Materiale	Serum	Citrat-plasma	Heparin-plasma	EDTA-Plasma
Prøvetagning	1 x 6 ml tør-glas (RØD PROP)	1 x 3.5 ml Natrium Citrat-glas (BLÅ PROP)	1 x 6 ml Li-Heparin-glas (GRØN PROP) Prøverør opbevares på IS før og efter prøvetagning	1 x 9 ml EDTA- glas (LILLA PROP) Prøverør opbevares på IS før og efter prøvetagning
Håndtering	Koagulerer 30-60 min ved stuetemp. Centrifugeres ved 2000 g 10 min Til 2 ml cryorør afpippeteres 5 x 500 µL serum	Centrifugeres ved 2000 g 10 min Til 2 ml cryorør afpippeteres 3 x 500 µL plasma	Centrifugeres inden 10 min ved 2000 g 10 min 4° C Til 2 ml cryorør afpippeteres 5 x 500 µL cryorør	Centrifugeres inden 10 min ved 2000 g 10 min 4° C Til 2 ml cryorør afpippeteres 8 x 500µL plasma Buffycoat afpippeteres til 1 cryorør
Opbevaring	Fryses straks ved -20°C eller -80°C Flyttes til -80°C indenfor 7 dage			
Forsendelse	Prøver sendes på tøris til Hvidovre Hospital ved studiets afslutning efter nærmere aftale			

LightBAR: Håndtering af Biologisk Materiale

Besøg	CID1,2,3,4		CID1,4	CID1,2,3,4
Materiale	Urin		Fæces	Blod, Rutine
Prøvetagning	Urinbæger, steril. Urinprøve sker på undersøgelsesdagen		Kit til opsamling sendes eller udleveres til deltager inden CID Opsamles af deltager hjemme.	Bestil blodprøvepakke "Særaftale 696" i SP. Bestil blodprøvepakke "xx" til Regionernes Bio- og GenomBank Print PTB
Håndtering	Rutine prøve	Biobank	Modtag 3 prøver ved ankomst af forsøgsdeltager. Sprit prøverne af Tjek mængde af ethanol i prøven. Hvis denne er lav: Efterfyld med 100% ethanol eller kasser evt. prøver. (Se SOP for Stool Sample)	Tag blodprøverne i forhold til PTB. Skan prøverne med PDA (ZEBRA)
	Fra urinbæger overføres 6 ml urin til Z-Urine rør (GULT-rør).	Til 4 ml cryorør afpipetteres min. 2 x 3.2 ml urin fra urinbæger		
Opbevaring		Fryses straks ved -20 eller -80°C Flyttes til -80°C indenfor 7 dage	Fryses samme dag ved -20 eller -80°C Flyttes til -80°C indenfor 7 dage	
Forsendelse	Sendes med rørpost til KBA	Prøver sendes på tøris til Hvidovre Hospital ved studiets afslutning efter aftale	Prøver sendes på tøris til Hvidovre Hospital ved studiets afslutning efter aftale	Sendes med rørpost til KBA

PRØVETAGNING:

LightBAR: Håndtering af Biologisk Materiale

Blodprøvetagning foretages i hht. gældende lokale vejledninger for identifikation af forsøgsdeltager samt for selve prøvetagningsproceduren. Prøvetagningsrør med antikoagulans (citrat, heparin, EDTA) vendes 5-7 gange umiddelbart efter prøvetagning. Prøvetagningsrør til plasma (heparin og EDTA) afkøles i våd is inden prøvetagning. Rørene opbevares i våd is indtil centrifugering. Prøvetagningsrør til serum og citrat plasma skal være stuetemp. inden prøvetagning og kan centrifugeres sammen. Prøvetagningsrør til serum skal stå ved stuetemperatur minimum 30 min for at koagulere inden centrifugering.

Centrifugering: Centrifugen skal være nedkølet til 4° C før centrifugering startes for heparin og EDTA

AFPIPPETERING: (se illustration sidst i dokument)

Cryorør: Der anvendes 2 ml cryorør (f.eks. IVUS cryorør IV-8020 fra InVitro) til plasma og 4 ml cryorør (f.eks. IV-8040) til urinprøver. Rørene skal være egnede til opbevaring på -80°C

Plasma (fra glas med antikoagulans):

Prøvetagningsrørene opbevares i våd is efter centrifugering og afpippeteres til cryorør som angivet i håndteringsskemaet.

Buffy coat: Afpippeteres fra EDTA-røret efter plasma er afpippeteret.

Buffy coat er det hvide lag, der ses mellem plasma og erythrocytter. Evt. overskydende plasma opsuges forsigtigt med en engangspipette og kasseres før buffycoat-laget forsigtigt opsuges med en engangspipette. Når buffycoat afpippeteres vil en smule plasma og erythrocytter afpippeteres med og det er helt i orden.

Serum: Serum skal være tydeligt adskilt fra koagel efter centrifugering ellers kan prøven centrifugeres igen.

Det er vigtigt for kvaliteten af prøvematerialet, at prøverne afpippeteres og fryses umiddelbart efter centrifugering

Etikettering: Prøver mærkes med etiketter som er egnet til frysning ved -80°C. Etiketterne skal indeholde følgende oplysninger og sættes op på nedenstående måde:

Eksempel:		
Patient ID (fra eCRF) Prøvetagningsdato Studie Prøvemateriale, CID-nr	DK01-1002 29-02-2024 LightBAR Serum, CID1	Alternativ (hvis der bruges mindre etiketter med 3 linjer): DK01-1002 29-02-2024- LightBAR Serum, CID1

Opbevaring: Serum-, plasma- og urin- og fæcesprøver opbevares i cryoboxe (se illustration nederst).

Prøvemateriale samles efter typen af materiale **og** CID-nr.

LightBAR: Håndtering af Biologisk Materiale

Dvs. alle rør med serum fra CID1 samles i en serie af kasser, alle rør med serum fra CID2 samles i en anden serie af kasser, alle rør med EDTA-plasma fra CID1 samles i en serie af kasser og så videre.

Hver box mærkes med Projektnavn, site ID, typen af prøvemateriale, CID nr. samt et fortløbende nr.

Eks: *LightBAR, Hvidovre, Serum, CID1, box 1*

Oplysningerne skrives på boxens front.

Prøver sættes ned startende fra øverste venstre hjørne og fortsætter til højre til rækken er helt fyldt og derefter i første position i næste række.

Der skal **ikke** være tomme huller mellem prøverne fra forskellige forsøgsparticipanter.

Tomme huller anvendes, hvor der skulle have været en prøve, men hvor det ikke har været muligt at få prøvemateriale nok.


Anvend gerne låg-indsatser (f.eks. IV-8100-W fra In Vitro) til det første cryorør i hvert sæt af rør, så prøverne fra forskellige forsøgsparticipanter fra hinanden.

Når prøver sendes til Hvidovre ved forsøgets afslutning, skal hver box følges af en liste med beskrivelse af indholdet:

Prøvemateriale, Box nr., CID nr. og ID på forsøgsparticipanter.

Forsendelse: Prøver sendes på tøris til Hvidovre Hospital ved studiets afslutning efter aftale.

Illustrationer:

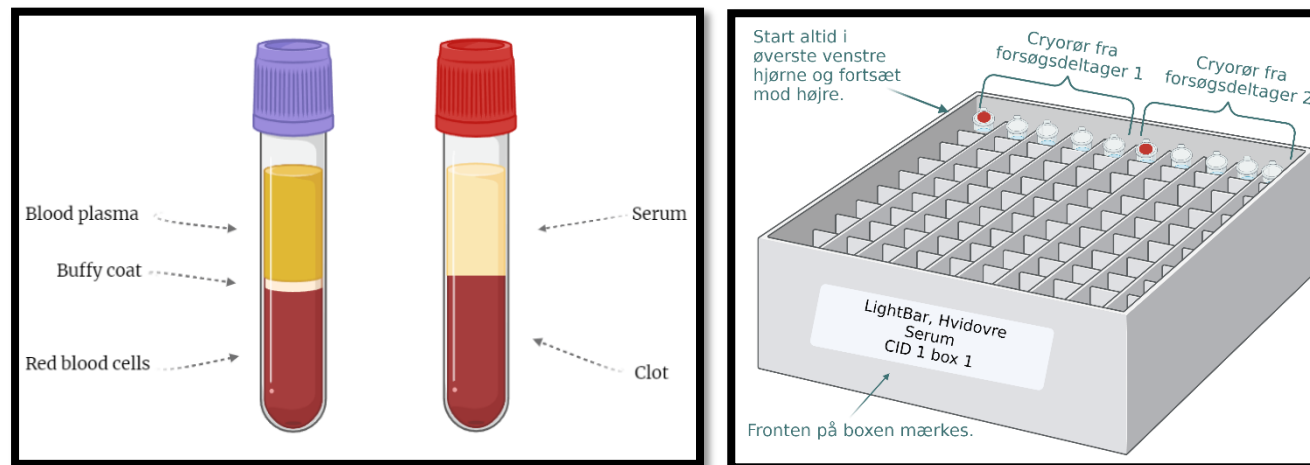

LightBAR: Håndtering af Biologisk Materiale

HISTORICAL RECORD of SOP

Rev# / Date	Written/Revised By	Revision Description	Approval
1. Written	Sabrina Wielsøe		
1. Edited	Sabrina Wielsøe	Volume of urine in biobank has been decreased: From 2 x 3.6 ml to 2 x 3.2 ml	03-07-2024
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Removed / replaced:			